



Bestellmöglichkeiten

**Haben wir Sie neugierig gemacht ?
Bestellen Sie gleich hier:**

Webshop Diagnostika



Homepage

www.medac-diagnostika.de

Email

diagnostika@medac.de


Telefon

+49 (0)4103 8006-8024

Fax

+49 (0)4103 8006-359

Fragen Sie nach Musterkits für Ihre Austestungen.

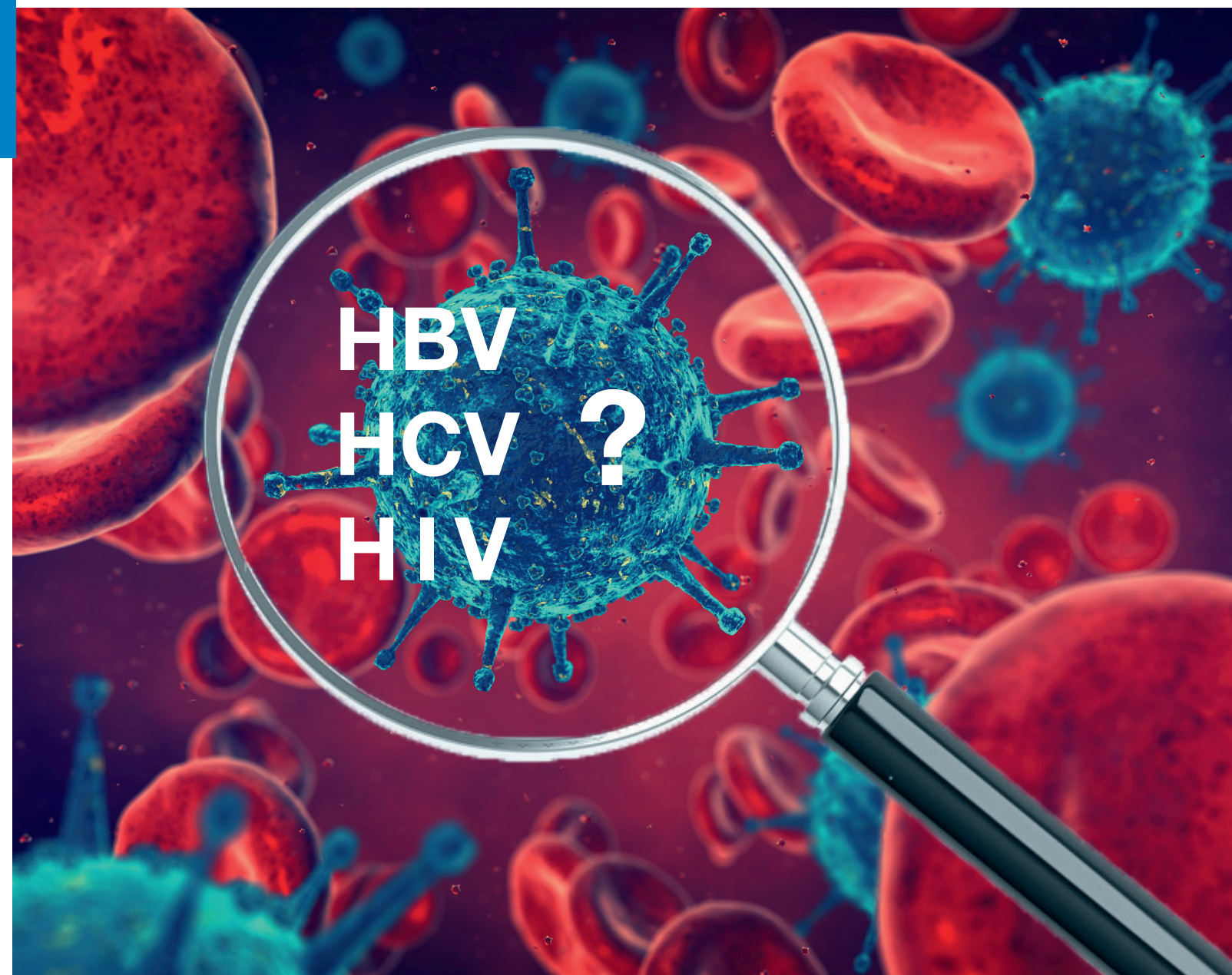

**Real-time PCR für die Diagnostik
von HBV, HCV und HIV**

medac GmbH
Diagnostika
Theaterstraße 6
22880 Wedel
Telefon: +49 (0)4103 8006-8024
Fax: +49 (0)4103 8006-359
E-mail: diagnostika@medac.de
www.medac-diagnostika.de

Alle Real-time PCR-Kits haben einen gebrauchsfertigen Mastermix, der alle für die PCR benötigten Komponenten enthält.

Die PCR beruht auf der „hot start“ Technologie, um unspezifische Reaktionen zu minimieren und eine maximale Sensitivität zu erreichen. Durch das angewandte UDG System (Uracil-DNA Glykosylase + dUTP), welches Amplifikate aus vorherigen Läufen abbaut, können falsch-positive Ergebnisse verhindert werden. Eine interne Kontrolle (IS), welche im PCR Kit enthalten ist und zur Probe dazugegeben wird, dient zur Überwachung des gesamten diagnostischen Prozesses (RNA- bzw. DNA-Extraktionskontrolle, reverse Transkriptions- und PCR-Amplifikationskontrolle).

