

# NTRK Microarray Zelllinienkontrolle




**NTRK** Zelllinien-  
kontrollen

Wir freuen uns über den Launch der neuen Histocyte NTRK Kontrolle.

NTRK Microarray Zelllinienkontrolle erhältlich als Packung mit 2 oder 5 Objektträgern oder als Block.

Produktname	Format	Art. Nr.
<b>NTRK Analyte Control</b> (2 Zellstanzen, negativ bzw. positiv für WT TrkA Protein)	2 Objektträger	HCL038
	5 Objektträger	HCL039
	Block	HCL040

- Validiert auf Ventana/Roche Benchmark Ultra mit dem pan-Trk Antikörper, Klon ERP17341
- Enthält zwei Zellstanzen: positive und negative Zelllinien für WT TrkA Protein

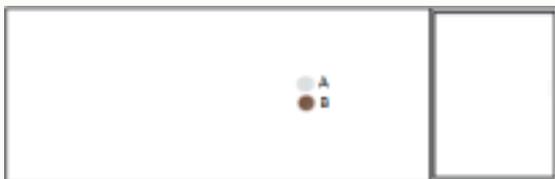

Zelllinie A: Brust Adenokarzinom  
Zelllinie B: Großzelliges Lymphom

Die Zellen wurden in 10% neutral gepuffertem Formalin fixiert und in Paraffin eingebettet.

Die Schnitte sind 4 µm dick, auf positiv geladenen Objektträgern aufgezogen und über Nacht bei 37° getrocknet.

## Produktspezifikationen


- Zellstanze A: negativ
- Zellstanze B: positiv für TrkA




Die Zelllinienkontrolle enthält Zellstanzen mit 1,5 – 2 mm Durchmesser und einer Länge von 3 - 3,5 mm.

Je nach Schnittdicke können über 300 Schnitte gemacht werden.

**Jetzt  
erhältlich**

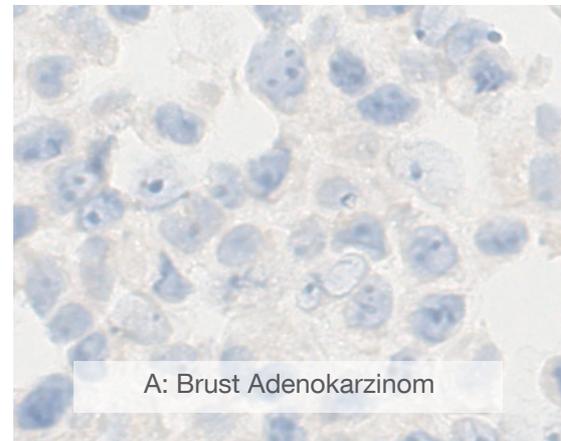

A: Brust Adenokarzinom

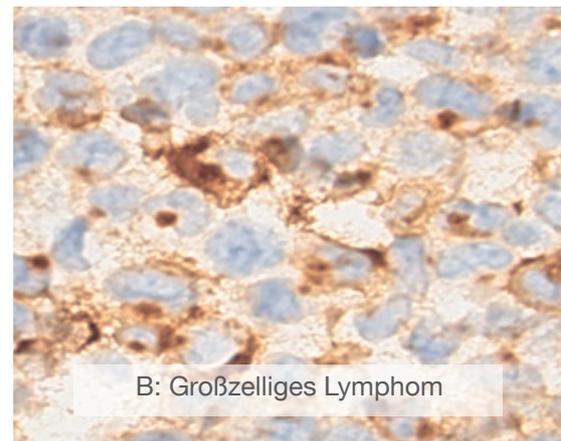

B: Großzelliges Lymphom

medac

## Bitte senden Sie mir mehr Informationen zu NTRK Analyte Control

(bitte unten entsprechend ankreuzen!):

- Ja, bitte senden Sie mir Informationen zur NTRK Analyte Control per Email
- Ja, bitte senden Sie mir Informationen zur NTRK Analyte Control per Fax
- Ja, bitte senden Sie mir ein Muster
- Ja, bitte rufen Sie mich an, um meine Fragen zu klären



Ansprechpartner:

Herr / Frau: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_



Stempel, Datum, Unterschrift



Email: \_\_\_\_\_

(bitte in DRUCKBUCHSTABEN)

medac GmbH ist offizieller Vertreter von HistoCyte Produkten




Vom Sehen  
zum Erkennen.

medac GmbH  
 Diagnostika  
 Theaterstraße 6  
 22880 Wedel  
 Telefon: +49 (0)4103 8006-342  
 Fax: +49 (0)4103 8006-359  
 E-mail: [diagnostika@medac.de](mailto:diagnostika@medac.de)  
[www.medac-diagnostika.de](http://www.medac-diagnostika.de)



Informationen  
aus erster Hand